

AgraStrip® PRO тестове за количествено определяне на ГМО в царевица, соя и рапица с използване на четец AgraVision™ Pro

Romer Labs Agra Strip® Pro GMO системата за тестване позволява бързо и лесно количествено определяне на място на ГМО в царевица, соя и рапица. Четецът AgraVision™ Pro рационализира целия анализ, намалявайки стъпките до абсолютния минимум, като същевременно задава нови стандарти за точност и използваемост.



Описание на продукта

Проточните тестове AgraStrip® Pro GMO позволяват бързото количествено определяне на място на най-често срещаните ГМО характеристики в царевицата, соята и рапицата. AgraStrip® Pro GMO тест лентите са изключително чувствителни и са проектирани за употреба с четеца AgraVision™ Pro, който позволява рационализиран анализ и интуитивна работа.

Системата AgraStrip® Pro GMO може независимо и едновременно да тества до четири проби за различни характеристики, а опростената работа помага за елиминиране на често срещани грешки при работа. Четецът AgraVision™ Pro контролира времето, температурата и потока, всичко това в рамките на опростена процедура, и предоставя резултати в рамките на минута. С вградения си инкубатор и устойчивост на прах и замърсявания, четецът осигурява прецизни и количествени резултати и позволява последователно, коректно документиране.

Приложения

Стоките, които могат да бъдат анализирани, включват царевица, соя и рапица. Вижте съответните инструкции за приложение или се свържете с техническите служби на Romer Labs за информация относно други стоки.

Съдържание на комплекта

AgraStrip® Pro GMO тестовите комплекти съдържат 50 отделни ленти с необходимите допълнителни материали.



Making the World's Food Safer

Характеристики и предимства

Бързо

Изпробвайте и освободете зърното си с време за тестване от 5 до 10 минути и възможност за едновременно тестване на 4 проби на място.

Просто

Насладете се на интуитивната, автоматизирана работа на четеца AgraVision™ Pro; край на грешките във времето и температурата на инкубация. Не са необходими чашки, ръчно измерване на времето или рязане на ленти.

Чувствителен

Открива едва 0,05% ГМО (1 на 2000 семена) в зърнени култури.

Надеждни и количествено определени

Четецът AgraVision™ Pro е проектиран да предоставя надеждни, количествено определени резултати. Получавайте точни показания в лесен за разбиране процентен формат.

За повече информация:

"Норком" ЕООД

тел: 0878 792 152; 0878 272 225

офис тел: 02 9733165

web: www.norcom-bio.com



АграСтрип®Професионален

AgraVision™ Pro

Внимателно прочетете листовката на опаковката, преди да извършите какъвто и да е тест.

3-стъпкова процедура накратко

1 Настройте четеца AgraVision™ и смелете пробата

Включете AgraVision™ Pro четец и изберете тестът за „ГМО“ метод.



Съберете представителна проба от семена и ги смелете.




Прехвърлете пробата в подходящ контейнер (напр. Whirl-Pak®) и я претеглете.



2 Подгответе пробата за теста

Добавете буфер за екстракция.

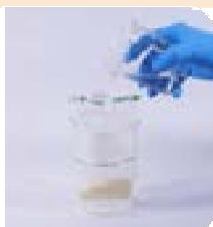


Разклатете пробата и оставете да се утаи.



3 Изпълнете теста

Вмъкнете тестовата лента в касетата. Поставете касетата в четеца за отчитане на резултат.

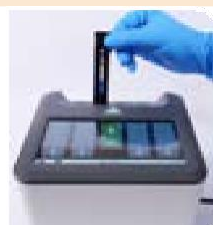

Прехвърлете 500 µl от екстракта супернатант в касетата, използвайки пипета доставена с тестовия комплект.



Вид тест	Описание	ГМО характеристика	Измервана култура	Код
АграСтрип®Pro RUR тест за зърно в насипно състояние	50 теста	CP4 EPSPS	Соя	10006554
АграСтрип®Pro LL тест за зърнени култури	50 теста	ПАТ	Царевица, соя, рапица	10006555
АграСтрип®Pro RUR HS тест за зърнени култури	50 теста	CP4 EPSPS	Царевица, соя, рапица	10006553
АграСтрип®Pro VIP3A тест за зърно в насипно състояние	50 теста	VIP3A	Царевица	10007131
АграСтрип®Pro Cry1F тест за зърнени култури	50 теста	Cry1F	Царевица	10007279
АграСтрип®Pro Cry34Ab1 тест за зърнени култури	50 теста	Cry34Ab1	Царевица	10007280
АграСтрип®Pro Cry1A тест за зърнени култури	50 теста	Cry1A.105/Cry1Ab	Царевица	10007278
AgraVision™ Pro Reader	Четец	няма данни	няма данни	10006324
Буфер за количествена екстракция - 1 л	Буфер	няма данни	няма данни	10001348
Буфер за количествена екстракция - 4 л	Буфер	няма данни	няма данни	10001349
Буфер за количествена екстракция - 20 L	Буфер	няма данни	няма данни	10001350