


Бързи и точни резултати



Бързи и точни резултати

AflaCheck™ е бърз метод за качествено откриване на афла микотоксини в храни и фуражи, с прагови нива на микотоксини от **10 ppb** или **20 ppb**.

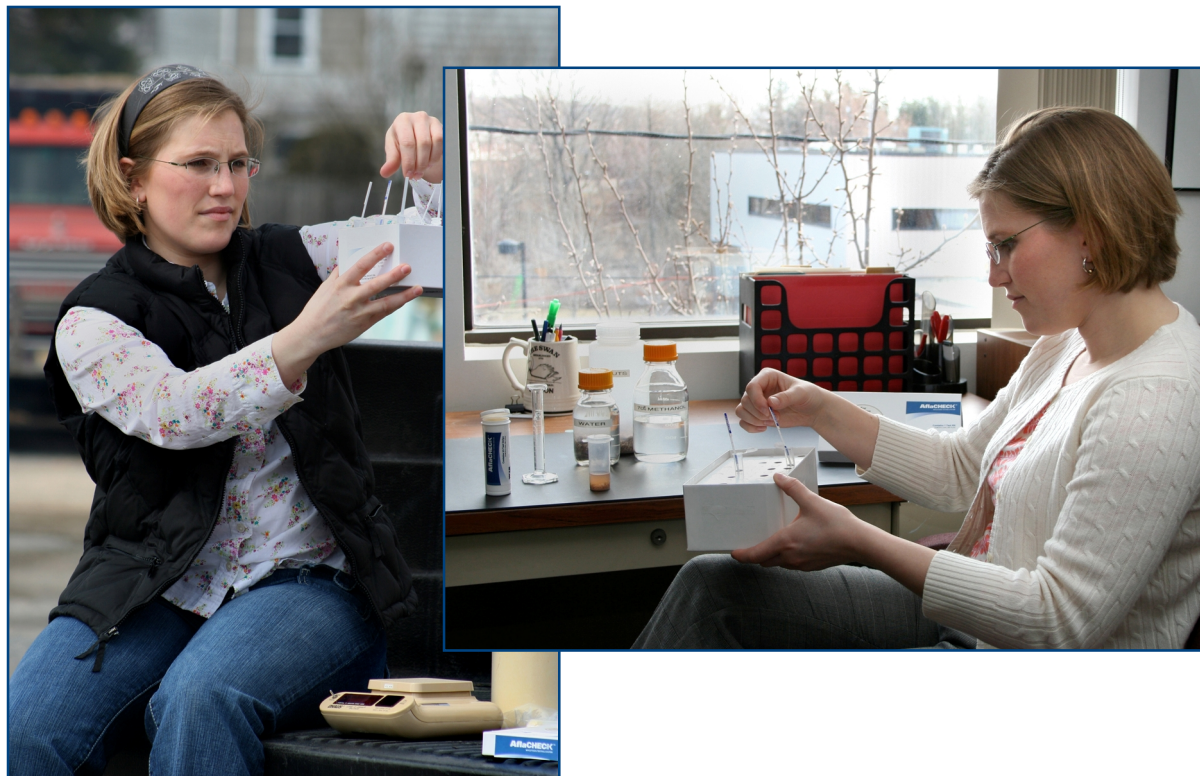

**10 ррб процедура за фъстъци,царевица, сорго
или 20 ррб процедура за царевица, сорго**



Извличане на пробата

Процедура при 10 ppb или 20 ppb



1. Измерете 5g. смляна проба и я изсипете в 40 mL туба за приготвяне на екстракт

Извличане на пробата

10 ppb процедура за фъстъци, царевица, сорго



2. Измерете **10 mL** от 70% метанол в градуиран цилиндър и изсипете разтвора в 40 mL-та туба за приготвяне на екстракт.

VICAM®

Извличане на пробата

20 ppb cut-off procedure for corn / milo



2. Измерете **20 mL** от 70% метанол в градуиран цилиндър и изсипете разтвора в 40 mL-та туба за приготвяне на екстракт.

VICAM®

Извличане на пробата

10 ppb и 20 ppb процедура



3. Затворете 40 mL-та туба за приготвяне на екстракт и разклащайте съдържанието с ръка в продължение на 3 мин.

Извличане на пробата

10 ppb и 20 ppb процедура



4. Изчакайте **3 минути** полученият екстракт да се утаи.

AflaCheck™ процедура

10 ppb и 20 ppb процедура



Steps 1–3: Поставете тубата за разреждане в картонената поставка. Добавете **250 µL** дестилирана вода в тубата за разреждане. Използвайте нов пипетор за да прехвърлите 250 µL от екстракта в тубата.

VICAM®

AflaCheck™ процедура

10 ppb и 20 ppb процедура




Steps 4–5: Затворете тубата за разреждане и я разклатете за смесване на съставките.
Поставете в тубата *AflaCheck* тестовата лента.

VICAM®

Отчитане на резултатите

10 ppb процедура за фъстъци, царевича, сорго

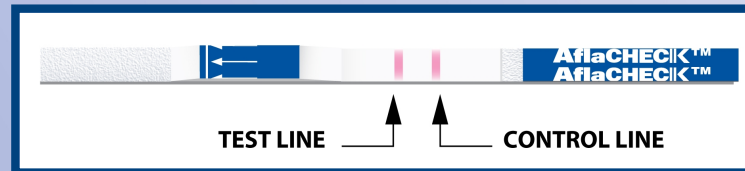


Резултати в рамките на 3 минути.

Наличието на две розови линии – тестовата линия и контролната линия, показват ОТРИЦАТЕЛЕН резултат. (ниво на замърсяване по малко от 10 ppb).

VICAM®

Отчитане на резултатите

10 ppb процедура за фъстъци, царевица, сорго

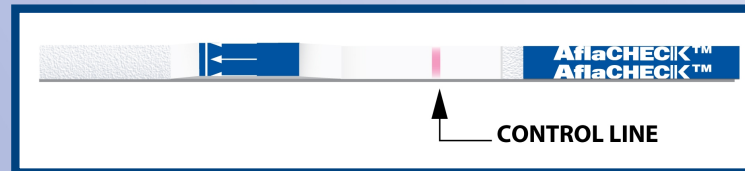


Резултати в рамките на 3 минути.

За проверка за ПОЛОЖИТЕЛЕН резултат (ниво на замърсяване равно или по-голямо от **10 ppb**), нека *AflaCheck* тестовата лента да остане в тубата поне **5 минути** преди да се отчетат резултати. Ако тестовата линия не се появи до 5 минути, то резултата е ПОЛОЖИТЕЛЕН.

VICAM®

Отчитане на резултатите

20 ppb процедура за царевица, сорго

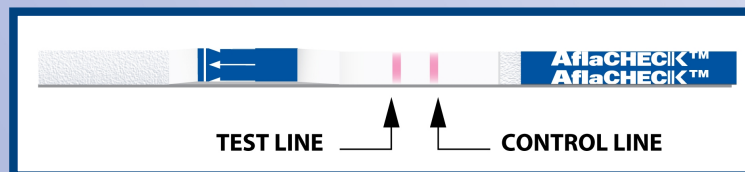


Резултати в рамките на 3 минути.

Наличието на две розови линии – тестовата линия и контролната линия, показват ОТРИЦАТЕЛЕН резултат. (ниво на замърсяване по малко от 20 ppb).

VICAM®

Отчитане на резултатите

20 ppb процедура за царевица, сорго

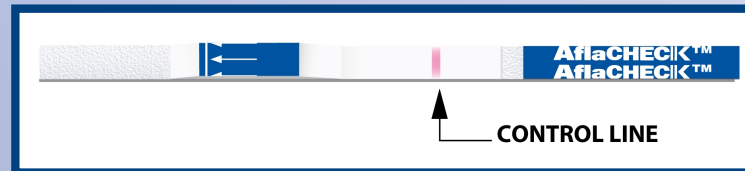

Резултати в рамките на 3 минути.

За проверка за ПОЛОЖИТЕЛЕН резултат (ниво на замърсяване равно или по-голямо от **20 ppb**), нека *AflaCheck* тестовата лента да остане в тубата поне **5 минути** преди да се отчетат резултати. Ако тестовата линия не се появи до 5 минути, то резултата е ПОЛОЖИТЕЛЕН.

VICAM®



За допълнителна информация относно VICAM AflaCheck™ тестовете позвънете на тел. +1.617.926.7045, факс: +1.617.923.8055, e-mail vicam@vicam.com или на “Норком” ЕООД - изключителен представител на продуктите на VICAM за България: тел: 0878792152; тел/факс: 02 9733165, e-mail: norcom@abv.bg